


# How to Apply WoundSeal MD

**For Nosebleeds:** Use only in the lower part of the nasal cavity. Gently blow nose to clear clots and apply only when bleeding resumes. WoundSeal MD needs blood to work. Do not tilt head during application. Avoid inhaling while applying WoundSeal MD Powder to avoid sneezing and coughing.



**1. Load Applicator** by rolling it in powder.

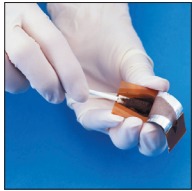


**2. Roll Applicator** inside the nostril to coat with powder.



**3. Remove Applicator and Pinch Nose** for 15 seconds.

**For Headwounds and other hard-to-reach areas:** Use enclosed applicator to apply powder.

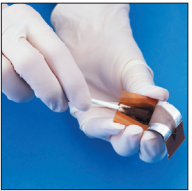

**1. Peel** back of blister then load applicator.



**2. Cover Wound** completely with powder.



**3. Press** for 30 seconds to form the protective scab and stop the bleeding.

Occasionally upon application of Powder a temporary warming or stinging sensation may be felt. Repeat application as needed. The protective scab may be left in place until it falls off naturally. Avoid wetting the scab for one hour. If WoundSeal MD Powder must be removed as determined by a healthcare professional, brush away loose powder then soak wound with sterile water until scab starts loosening from wound. Gently scrape off loosened scab with gloved finger or tongue depressor.

**Warnings: FOR EXTERNAL USE ONLY.** Not intended to replace stitches. Seek medical attention if wound requires stitches. Do not apply WoundSeal MD Powder to visibly infected wounds. Keep out of reach of children. May be harmful if inhaled or ingested. Avoid aspirating the product into the nasal or oral cavity. Avoid contact with eyes; if contact should occur, thoroughly rinse eyes with water. Seek medical attention if any irritation persists or if bleeding continues as this could indicate a more serious problem.

**CAUTION:** Store in a clean, dry place. Use by the expiration date listed. Discard if dispenser is damaged, opened, or if powder has caked and does not flow freely. Discard contents after use, as WoundSeal MD Powder is guaranteed effective only if it has not been left exposed to air or humidity.

**Ingredients:** Hydrophilic polymer and Potassium Ferrate.

## Modo de aplicación de WoundSeal MD en Polvo

**Para el sangrado nasal:** Utilice el polvo solamente en la parte más baja de la fosa nasal. Suéñese la nariz muy suavemente para eliminar los coágulos que pueda tener, y aplique el polvo únicamente cuando vuelva a sangrar. WoundSeal MD necesita sangre para poder funcionar. No incline la cabeza mientras esté aplicando el polvo. Evite inhalar mientras este aplicando WoundSeal MD en Polvo para evitar que estornude o tosa.



1. **Vierta** el polvo sobre la herida sangrante hasta cubrirla completamente.



3. **Rotar el aplicador** dentro de la fosa nasal para cubrirla con el polvo.



4. **Retire el aplicador de la nariz y apriete la nariz con los dedos** por espacio de 15 segundos.



## Modo de aplicación de WoundSeal MD en Polvo

**Para heridas difíciles de tratar, heridas en la cabeza.** Utilice el dispositivo de aplicación que se adjunta para aplicar el polvo. Despegue la parte posterior del empaque.



1. **Prepare el aplicador:** ruede el aplicador sobre el polvo.



2. **Cubra la herida** con tanto polvo como sea posible.



3. **Presione** por espacio de 30 segundos para que se forme la costra protectora y cese la hemorragia.

Ocasionalmente, se puede percibir una sensación temporal de calor o de ardor. Repita la aplicación si es necesario. La costra protectora que se forma debe dejarse en el sitio hasta que se caiga por sí sola. Evite mojar la costra por espacio de una hora después de aplicado el producto. Si el profesional de la salud determina que el WoundSeal MD en Polvo debe ser removido, quite el exceso de polvo, luego remoje la herida en agua estéril hasta que la costra empiece a despegarse. Quite con cuidado la costra despegada con un dedo enguantado o un bajalengua.


**SOLO PARA USO EXTERNO.** No reemplaza puntos de sutura. Buscar asistencia médica en caso de necesitar puntos de sutura. El polvo QR no se debe aplicar sobre arterias que sangran o sobre heridas visiblemente infectadas. Guardar este producto lejos del alcance de los niños. Puede ser dañino en caso de ser inhalado o ingerido. Evite aspirar el producto a través de la cavidad nasal u oral. Evitar el contacto con los ojos. Si se produce contacto, limpiar muy bien con agua. Buscar asistencia médica si la irritación persiste o si el sangrado continúa porque esto podría ser una indicación de un problema más grave.

**PRECAUCIÓN:** Conservar en un lugar limpio y seco. Usar antes de la fecha de expiración indicada en la caja. Después de utilizar el polvo del dispensador, deseche el resto del contenido ya que el polvo WoundSeal MD es garantizado que trabaja solamente si no ha sido expuesto al aire o a la humedad.

**Ingredientes:** Polímero hidrófilo y ferrato de potasio.

## Mode d'application de la poudre WoundSeal MD

**Pour les saignements de nez:** Utilisez uniquement dans la partie inférieure de la fosse nasale. Mouchez-vous doucement pour dégager les caillots et appliquez uniquement lorsque le saignement reprend. WoundSeal MD a besoin de sang pour agir. N'inclinez pas la tête pendant l'application. Veillez à ne pas inhaler la poudre WoundSeal MD en l'appliquant pour éviter d'éternuer et de tousser.

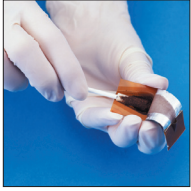

1. **Chargez l'applicateur** en le roulant dans la poudre.



2. **Roulez l'applicateur** à l'intérieur de la narine pour l'enduire de



3. **Retirez l'applicateur et pincez le nez** pendant 15 secondes.



## Mode d'application de la poudre WoundSeal MD

**Pour blessures à la tête et autres parties difficiles d'accès** Utilisez l'applicateur inclus pour appliquer la poudre.



1. **Peler** l'arrière du blister : **Chargez l'applicateur** en le roulant dans la poudre.



2. **Recouvrez entièrement la plaie** de poudre.



3. **Appuyez** pendant 30 secondes pour que se forme la croûte protectrice et que le saignement s'arrête.

Parfois, lors de l'application, un échauffement ou un picotement passager est perceptible. Répétez l'application si nécessaire. La croûte protectrice peut être laissée en place sans danger jusqu'à ce qu'elle tombe naturellement. Évitez de mouiller la croûte pendant une heure. Si un professionnel de santé estime qu'il est nécessaire d'enlever la poudre WoundSeal MD, essuyez la poudre décollée, puis trempez la plaie dans de l'eau stérile jusqu'à ce que la croûte commence à se détacher de la plaie. Pour la retirer, grattez doucement la croûte partiellement décollée avec un doigt ganté ou un abaisse-langue.

**Mises en garde : À USAGE EXTERNE UNIQUEMENT.** Produit non destiné à remplacer les sutures. Consultez un médecin si la plaie nécessite des sutures. N'appliquez pas la poudre WoundSeal à des plaies visiblement infectées. Conservez à l'abri des enfants. Peut être nocif en cas d'inhalation ou d'ingestion. Évitez d'aspirer le produit dans les fosses nasales ou la cavité orale. Évitez le contact avec les yeux; si le contact se produit, rincez-vous abondamment les yeux avec de l'eau. Consultez un médecin en cas d'irritation ou de saignement persistants, car cela pourrait indiquer un problème plus grave.

**ATTENTION :** Conservez dans un lieu propre et sec. Utilisez avant la date de péremption indiquée. Éliminez si le bec verseur est endommagé ou ouvert ou que la poudre a séché et ne s'écoule pas librement. Éliminez le contenu après l'emploi, car l'efficacité de la poudre WoundSeal est garantie uniquement si elle n'a pas été laissée exposée à l'air ou à l'humidité.